

# 高壓滅菌器



**Solutions for your Autoclave**



**勝博國際集團**  
SUNPRO INTERNATIONAL INC

台北 **勝綻科技**  
Tel:02-8791-8971

台中 **勝瑋科技**  
Tel:04-2247-9811

高雄 **勝騏科技**  
Tel:07-338-5550

## 桌上型高壓滅菌器 GT系列



真空桌上型

### 聯鎖裝置：

- 只有溫度和壓力處於安全的情況下才能打開腔蓋
- 開放式儲水箱及蒸汽發生器均配有水位感測器，缺水自動報警

### 排氣控制：

- 滅菌完成後，排氣閥可按預先設定的溫度自動打開排氣

### 特殊功能：

- USB隨身碟存儲滅菌資料，印表機列印溫度壓力曲線、F0值
- “Inspiration III”新型微電腦智慧控制系統

### 安全裝置：

- 閉蓋檢查系統、壓力安全聯鎖裝置、乾燒保護、過壓保護、安全閥、過溫保護、水位監測、過流與短路保護、防燙腔蓋、自動故障檢測

型號	真空型 GT14DP	真空型 GT18DP	真空型 GT23DP
容量(L)	14	18	23
滅菌室(mm)	230×360	246×400	246×496
額定功率(W)	1800	1800	1800
重量(Kg)	60	68	81
滅菌溫度	115 - 135 °C		
滅菌時間設置	1 - 999分鐘		
脈動次數	1 - 5次		
乾燥設定	乾燥溫度80°C~160°C 乾燥時間1-300分鐘		
真空參數	真空度≤-92kpa 真空洩漏率≤0.13kpa/分鐘		
壓力	額定工作壓力0.25MPa 安全閥起跳壓力0.29MPa		
滅菌模式	布包模式：預熱→抽真空→加熱→脈動→滅菌→排汽→乾燥→完成 器械類程式：預熱→抽真空→加熱→脈動→滅菌→排汽→乾燥→完成 液體類程式：預熱→加熱→滅菌→排汽→完成 排水模式：加熱→滅菌→排水→完成 乾燥程式：乾燥→完成 BD測試程式：預熱→抽真空→加熱→脈動→滅菌→排汽→完成 真空洩露程式：抽真空→測試→完成		
配件	置物籃架、置物盤5個		
選配	點陣式印表機、消毒盒		

# 泛用型高壓滅菌器 GI-T系列



標準型



乾燥型

## 多重壓力保護系統

- 壓力連鎖裝置自動感應滅菌腔內壓力並鎖緊，有效防止誤操作導致蒸汽噴出傷人
- 系統可即時監控滅菌腔內壓力變化
- 壓力出現異常時，雙重過壓保護系統立即啟動洩壓或斷電保護

## 排氣控制

- 滅菌完成後，排氣閥可按預先設定的溫度自動打開排氣






## 人性化外觀設計

- 腔蓋和檯面均覆以樹脂隔熱層，避免燙手
- 獨特的蒸氣排放與收集系統，避免蒸氣燙傷危險

## 閉蓋檢查系統

- 系統自動檢測腔蓋鎖緊情況，如腔蓋未鎖緊，滅菌器無法啟動工作

型號	標準型GI36SW 乾燥型GI36SR	標準型GI54SW 乾燥型GI54SR	標準型GI80SW 乾燥型GI80SR	標準型GI100SW 乾燥型GI100SR
容量(L)	36	54	80	100
滅菌室(mm)	φ325×460	φ325×670	φ400×709	φ400×809
額定功率(W)	2300	2600	4600	4600
滅菌溫度	105-135°C			
滅菌時間設置	1-6000分鐘			
融化溫度設置	60-100°C			
融化時間設置	1-6000分鐘			
保溫溫度	45-60°C			
壓力	-0.1 ~ 0.5 Mpa			
滅菌模式	固體模式：加熱→滅菌→排汽 固體帶乾燥模式：加熱→滅菌→排汽→排水→乾燥（針對SR系列） 液體帶保溫模式：加熱→滅菌→預冷→排汽→保溫 液體模式：加熱→滅菌→預冷→排汽 瓊脂模式：加熱→融化→保溫			
附件	不銹鋼提籃 (φ300×200) × 2	不銹鋼提籃 (φ300×200) × 3	不銹鋼提籃 (φ360×280) × 2	不銹鋼提籃 (φ360×220) × 3

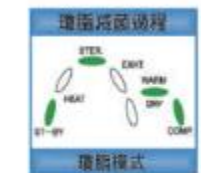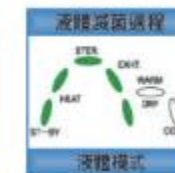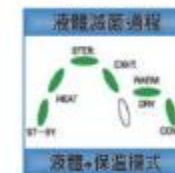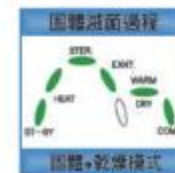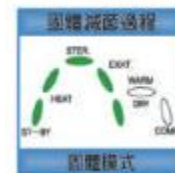

# 智能型高壓滅菌器 GR系列



標準 / 進水型

乾燥型

## 冷卻鎖 OPEN 溫度

- 每個程式均可根據滅菌物熱慣性的不同設置冷卻鎖 OPEN 溫度，防止使用者在滅菌物（尤其是液體滅菌物）還處於不安全狀態下開蓋導致燙傷

## 排氣控制

- 滅菌完成後，排氣閥可按預先設定的溫度自動打開排氣


## 人性化外觀設計

- 腔蓋和檯面均覆以樹脂隔熱層，避免燙手
- 向上開啟的翻蓋式腔門，節省空間又方便提放物品


## 連鎖裝置

- 獨特的“八柱均分式”連鎖裝置，比一般的連鎖更裝置安全可靠

型號	標準型GR60SA	標準型GR85SA	標準型GR110SA
	自動進水型GR60SF 自動乾燥型GR60SR	自動進水型GR85SF 自動乾燥型GR85SR	自動進水型GR110SF 自動乾燥型GR110SR
容量(L)	60	85	110
滅菌室(mm)	φ400×505	φ400×700	φ400×895
額定功率(W)	2900	4600	4600
滅菌溫度	105-138°C		
滅菌時間設置	1-6000分鐘		
融化溫度設置	60-100°C		
融化時間設置	1-6000分鐘		
保溫溫度	45-60°C		
壓力	-0.1 ~ 0.5 Mpa		
滅菌模式	固體模式：加熱→滅菌→排汽、風冷 固體帶乾燥模式：加熱→滅菌→排汽、風冷→排水→乾燥（針對SR系列） 液體帶保溫模式：加熱→滅菌→預冷→排汽→保溫 液體模式：加熱→滅菌→預冷→排汽 廢棄物模式：加熱→滅菌→排汽、風冷 瓊脂模式：加熱→融化→保溫		
自動進水功能	DF, DR標配 DA可選購		
附件	不銹鋼提籃 (φ370×190) × 2	不銹鋼提籃 (φ370×280) × 2	不銹鋼提籃 (φ370×250) × 3

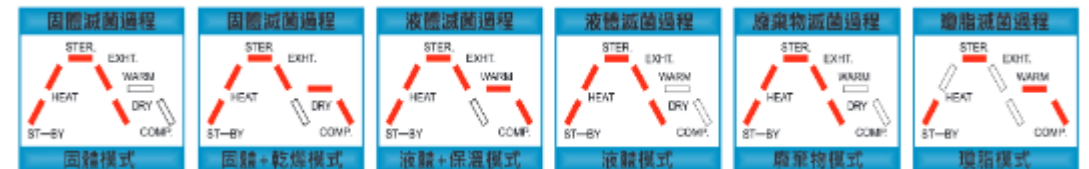

# 智能型高壓滅菌器 GW系列

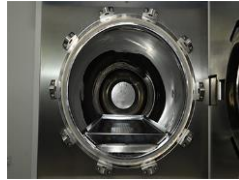

## 1. PLC工業控制系統:

實現了滅菌過程的全自動控制，便捷地進行維護、查詢、校驗、記錄及擴展升級

## 2. 夾套式設計：

有效減少冷點與熱點溫差，零蒸汽排放；循環水設計，有效吸收蒸汽

## 3. 液晶觸摸顯示屏：

數據及圖示清晰顯示，屏幕顯示腔內溫度，水箱溫度，夾套壓力，滅菌器腔壓力

## 4. 蒸汽發生器：

採用大功率三路加熱裝置，具備自動控制進水、加熱及防干燒、防超壓保護等功能

## 5. 三倍水壓測試：

產品通過三倍水壓測試，領先的壓力負荷保障儀器安全操作

## 6. 人性化權限管理，數據存儲接口

型號	臥式真空型 GW180DP	臥式真空型 GW280DP
容量(L)	180	280
外腔尺寸 長 x 寬 x 高 ( mm )	1450x800x1500	1450x800x1500
內腔尺寸 長 x 寬 x 高 ( mm )	1000x500x1200	1000x600x1200
額定功率(W)	14kw	21kw
真空度	< -92kpa	< -92kpa
真空洩漏率	< 0.13kpa	< 0.13kpa
乾燥時間	1-300 min	1-300 min
滅菌溫度	105-136°C	
滅菌時間設置	1-6000分鐘	
融化溫度設置	60-100°C	
融化時間設置	1-6000分鐘	
保溫溫度	45-60°C	
保溫時間設置	1-9999分鐘	
滅菌模式	固體帶乾燥模式：加熱→滅菌→排汽→排水→乾燥 液體帶保溫模式：加熱→滅菌→預冷→排汽→保溫 真空模式：預真空-加熱-脈動-加熱-滅菌-排氣 真空洩漏測試模式：預真空-保壓	
電源需求	380V/50Hz	

## 多樣擴充配件



USP 381/660  
藥典軟體



數據印表機,USB輸出



樣品溫度計



含底部銹鋼提籃

## 符合多種國際規範



## 重點客戶包含了



牙醫



製藥



醫療

## ZEALWAY AUTOCLAVE SPARE PARTS' BRANDS >>>

To make sure the excellent quality, ZEALWAY only use the best spare parts for manufacturing Autoclave, below are part of the spare parts and brands:

